

50 % uporabnikov kontaktnih leč z astigmatizmom uporablja sferične kontaktne leče, kar omejuje njihovo delovanje¹

ZADOVOLJITE ŠE VEČ UPORABNIKOV

IN TISTIM Z ASTIGMATIZMOM PONUDITE VSE PREDNOSTI KONTAKTNIH LEČ PRECISION1™



SMARTSURFACE® TEHNOLOGIJA

Kontaktne leče PRECISION1™ for Astigmatism imajo prav tako izjemno tanek in zmogljiv sloj vlage, kot sferične kontaktne leče.²




- SMARTSURFACE® tehnologija pomaga ohraniti stabilnost solznega filma²

ČAS NAMEŠČANJA

V povprečju se namesti v manj kot 60 sekundah⁴

PRECISION BALANCE 8|4™

Preverjen dizajn za stabilno uporabo kontaktnih leč.^{3*} Očesni strokovnjaki so pri prvem predpisu kontaktnih leč PRECISION1™ for Astigmatism uspešni v 99 % primerov.^{4**}

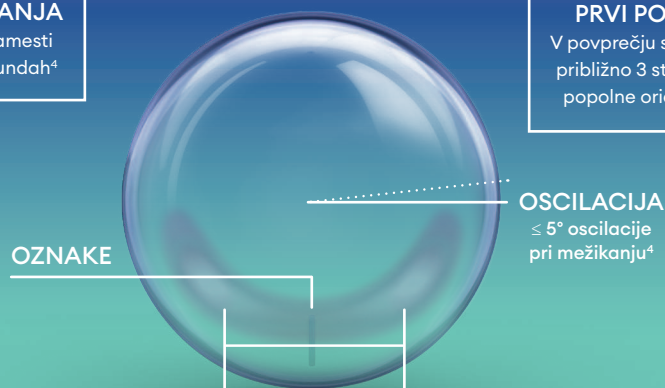

- Omogočajo primerno orientacijo
- Ohranjajo optimalno prileganje, gibljivost in stabilnost
- 100 % uporabnikov je opazilo optimalno ali zadovoljivo gibljivost in centriranje leče^{4†}

PRVI POGLED

V povprečju se namesti približno 3 stopinje od popolne orientacije⁴

INFORMACIJE O IZDELKU

Material	verofilcon A	Modulus (MPa)	0,6
Tehnologija leče	SMARTSURFACE™ tehnologija	TD (mm)	14,5
Vsebnost vode na površini leče	>80%	Dk/†	90 @ -3,00D
Vsebnost vode v jedru leče	51%	Način uporabe	dnevno, za enkratno uporabo
Dizajn	PRECISION BALANCE 8 4™	Pakiranje	5 (preizkusnih) kontaktnih leč, 30 in 90 kontaktnih leč
Bazna krivina (mm)	8,5	UV zaščita†	Razred I UV filter (≥90% UVA, ≥99% UVB)
TC (mm)	0,10 (-3,00D)	Obarvanost za lažje rokovanje	VISITINT™

P A R A M E T R I	Razpon dioptrij	Cilinder	Osi
+	+4,00D do +0,25D (0,25D stopinj)	-0,75D, -1,25D, -1,75D	10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 160°, 170°, 180°
		-2,25D	10°, 20°, 160°, 170°, 180°
-	Plano do -6,00D (0,25D stopinj)	-0,75D, -1,25D, -1,75D	polni krog 10° stopinj
		-2,25D	10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 160°, 170°, 180°
-	-6,50D do -8,00D (0,50D stopinj)	-0,75D, -1,25D, -1,75D	10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 160°, 170°, 180°
		-2,25D	10°, 20°, 160°, 170°, 180°

* Na osnovi kliničnih študij dizajna PRECISION BALANCE 8|4™ pri kontaktnih lečah AIR OPTIX® for Astigmatism; n=163.

** Na osnovi gibljivosti, centriranja in rotacije leče pri prvotnem nameščanju.

† V klinični študiji izvedeni na 5 lokacijah v ZDA; n=39.

‡ Kontaktne leče z UV zaščito NISO nadomestek za zaščitna UV očala (maske, sončna očala), ki blokirajo UV žarke, ker oči in predela okrog oči ne prekrivajo popolnoma. (Iz IFU: 93 % dejanska meritev za blokiranje UVA žarkov)

Alcon

POKRIJE 94% UPORABNIKOV Z ASTIGMATIZMOM*

PRETVORNIK DIOPTRIJ OČALNE LEČE V DIOPTRIJE KONTAKTNE LEČE

TORIČNE KONTAKTNE LEČE PRECISION1™ JE ENOSTAVNO PREDPISATI, TAKO KOT SFERIČNE LEČE.⁸



Izhaja iz tehnologije vodnega gradienta

Izjemno tanek sloj vlage, ki raste od 51 % vsebnosti vode v jedru leče, do preko 80 % vsebnosti vode na zunanji površini leče.⁵



PRECISION BALANCE 8|4™ dizajn

Leča se namesti v manj kot 60 sekundah, oznaka na položaju urinega kazalca, ko je ura 6, pa nameščanje olajša.⁶



Skoraj 9 od 10 uporabnikov se strinja,

da so kontaktne leče PRECISION1™ for Astigmatism enostavne za uporabo.⁷

Za dodatne informacije kontaktirajte EMEA d.o.o., uradnega distributerja izdelkov Alcon v Sloveniji.



Verteks korekcija: 12mm

CILINDER OČALNE LEČE (D)

	-0.75		-1.00		-1.25		-1.50		-1.75		-2.00		-2.25		-2.50		-2.75		-3.00		
	sph	cyl	sph	cyl	sph	cyl	sph	cyl	sph	cyl	sph	cyl	sph	cyl	sph	cyl	sph	cyl	sph	cyl	
-9.00	-8.00	sph	-8.00	-0.75	-8.00	-0.75	-8.00	-1.25	-8.00	-1.25	-8.00	-1.75	-8.00	-1.75	-8.00	-1.75	-8.00	-2.25	-8.00	-2.25	
-8.75	-8.00	sph	-8.00	-0.75	-8.00	-0.75	-8.00	-1.25	-8.00	-1.25	-8.00	-1.75	-8.00	-1.75	-8.00	-1.75	-8.00	-2.25	-8.00	-2.25	
-8.50	-8.00	sph	-7.50	-0.75	-7.50	-0.75	-7.50	-1.25	-7.50	-1.25	-7.50	-1.75	-7.50	-1.75	-7.50	-1.75	-7.50	-2.25	-7.50	-2.25	
-8.25	-7.75	sph	-7.50	-0.75	-7.50	-0.75	-7.50	-1.25	-7.50	-1.25	-7.50	-1.75	-7.50	-1.75	-7.50	-1.75	-7.50	-2.25	-7.50	-2.25	
-8.00	-7.75	sph	-7.50	-0.75	-7.50	-0.75	-7.50	-1.25	-7.50	-1.25	-7.50	-1.75	-7.50	-1.75	-7.50	-1.75	-7.50	-2.25	-7.50	-2.25	
-7.75	-7.50	sph	-7.00	-0.75	-7.00	-0.75	-7.00	-1.25	-7.00	-1.25	-7.00	-1.75	-7.00	-1.75	-7.00	-1.75	-7.00	-2.25	-7.00	-2.25	
-7.50	-7.25	sph	-7.00	-0.75	-7.00	-0.75	-7.00	-1.25	-7.00	-1.25	-7.00	-1.75	-7.00	-1.75	-7.00	-1.75	-7.00	-2.25	-7.00	-2.25	
-7.25	-7.00	sph	-6.50	-0.75	-6.50	-0.75	-6.50	-1.25	-6.50	-1.25	-6.50	-1.75	-6.50	-1.75	-6.50	-1.75	-6.50	-2.25	-6.50	-2.25	
-7.00	-6.75	sph	-6.50	-0.75	-6.50	-0.75	-6.50	-1.25	-6.50	-1.25	-6.50	-1.75	-6.50	-1.75	-6.50	-1.75	-6.50	-2.25	-6.50	-2.25	
-6.75	-6.50	sph	-6.00	-0.75	-6.00	-0.75	-6.00	-1.25	-6.00	-1.25	-6.00	-1.75	-6.00	-1.75	-6.00	-1.75	-6.00	-2.25	-6.00	-2.25	
-6.50	-6.00	-0.75	-6.00	-0.75	-6.00	-0.75	-6.00	-1.25	-6.00	-1.25	-6.00	-1.75	-6.00	-1.75	-6.00	-1.75	-6.00	-2.25	-6.00	-2.25	
-6.25	-5.75	-0.75	-5.75	-0.75	-5.75	-0.75	-5.75	-1.25	-5.75	-1.25	-5.75	-1.75	-5.75	-1.75	-5.75	-1.75	-5.75	-2.25	-5.75	-2.25	
-6.00	-5.50	-0.75	-5.50	-0.75	-5.50	-0.75	-5.50	-1.25	-5.50	-1.25	-5.50	-1.75	-5.50	-1.75	-5.50	-1.75	-5.50	-2.25	-5.50	-2.25	
-5.75	-5.50	-0.75	-5.50	-0.75	-5.50	-0.75	-5.50	-1.25	-5.50	-1.25	-5.50	-1.75	-5.50	-1.75	-5.50	-1.75	-5.50	-2.25	-5.50	-2.25	
-5.50	-5.25	-0.75	-5.25	-0.75	-5.25	-0.75	-5.25	-1.25	-5.25	-1.25	-5.25	-1.75	-5.25	-1.75	-5.25	-1.75	-5.25	-2.25	-5.00	-2.25	
-5.25	-5.00	-0.75	-5.00	-0.75	-5.00	-0.75	-5.00	-1.25	-5.00	-1.25	-5.00	-1.75	-5.00	-1.75	-5.00	-1.75	-5.00	-2.25	-5.00	-2.25	
-5.00	-4.75	-0.75	-4.75	-0.75	-4.75	-0.75	-4.75	-1.25	-4.75	-1.25	-4.75	-1.75	-4.75	-1.75	-4.75	-1.75	-4.75	-2.25	-4.75	-2.25	
-4.75	-4.50	-0.75	-4.50	-0.75	-4.50	-0.75	-4.50	-1.25	-4.50	-1.25	-4.50	-1.75	-4.50	-1.75	-4.50	-1.75	-4.50	-2.25	-4.50	-2.25	
-4.50	-4.25	-0.75	-4.25	-0.75	-4.25	-0.75	-4.25	-1.25	-4.25	-1.25	-4.25	-1.75	-4.25	-1.75	-4.25	-1.75	-4.25	-2.25	-4.25	-2.25	
-4.25	-4.00	-0.75	-4.00	-0.75	-4.00	-0.75	-4.00	-1.25	-4.00	-1.25	-4.00	-1.75	-4.00	-1.75	-4.00	-1.75	-4.00	-2.25	-4.00	-2.25	
-4.00	-4.00	-0.75	-4.00	-0.75	-4.00	-0.75	-4.00	-1.25	-4.00	-1.25	-4.00	-1.75	-4.00	-1.75	-4.00	-1.75	-4.00	-2.25	-4.00	-2.25	
-3.75	-3.75	-0.75	-3.75	-0.75	-3.75	-0.75	-3.75	-1.25	-3.75	-1.25	-3.75	-1.75	-3.75	-1.75	-3.75	-1.75	-3.75	-2.25	-4.00	-2.25	
-3.50	-3.50	-0.75	-3.50	-0.75	-3.50	-0.75	-3.50	-1.25	-3.50	-1.25	-3.50	-1.75	-3.50	-1.75	-3.50	-1.75	-3.50	-2.25	-3.75	-2.25	
-3.25	-3.25	-0.75	-3.25	-0.75	-3.25	-0.75	-3.25	-1.25	-3.25	-1.25	-3.25	-1.75	-3.25	-1.75	-3.25	-1.75	-3.25	-2.25	-3.50	-2.25	
-3.00	-3.00	-0.75	-3.00	-0.75	-3.00	-0.75	-3.00	-1.25	-3.00	-1.25	-3.00	-1.75	-3.00	-1.75	-3.00	-1.75	-3.00	-2.25	-3.25	-2.25	
-2.75	-2.75	-0.75	-2.75	-0.75	-2.75	-1.25	-2.75	-1.25	-2.75	-1.25	-2.75	-1.75	-2.75	-1.75	-2.75	-1.75	-2.75	-2.25	-3.00	-2.25	
-2.50	-2.50	-0.75	-2.50	-0.75	-2.50	-1.25	-2.50	-1.25	-2.50	-1.25	-2.50	-1.75	-2.50	-1.75	-2.50	-1.75	-2.50	-2.25	-2.75	-2.25	
-2.25	-2.25	-0.75	-2.25	-0.75	-2.25	-1.25	-2.25	-1.25	-2.25	-1.75	-2.25	-1.75	-2.25	-1.75	-2.25	-1.75	-2.25	-2.25	-2.50	-2.25	
-2.00	-2.00	-0.75	-2.00	-0.75	-2.00	-1.25	-2.00	-1.25	-2.00	-1.75	-2.00	-1.75	-2.00	-1.75	-2.00	-1.75	-2.00	-2.25	-2.25	-2.25	
-1.75	-1.75	-0.75	-1.75	-0.75	-1.75	-1.25	-1.75	-1.25	-1.75	-1.75	-1.75	-1.75	-2.00	-1.75	-2.00	-1.75	-1.75	-2.25	-2.00	-2.25	
-1.50	-1.50	-0.75	-1.50	-0.75	-1.50	-1.25	-1.50	-1.25	-1.50	-1.75	-1.50	-1.75	-1.75	-1.75	-1.50	-2.25	-1.50	-2.25	-1.75	-2.25	
-1.25	-1.25	-0.75	-1.25	-0.75	-1.25	-1.25	-1.25	-1.25	-1.25	-1.75	-1.25	-1.75	-1.50	-1.75	-1.25	-2.25	-1.50	-2.25	-1.50	-2.25	
-1.00	-1.00	-0.75	-1.00	-0.75	-1.00	-1.25	-1.00	-1.25	-1.00	-1.75	-1.00	-1.75	-1.25	-1.75	-1.00	-2.25	-1.25	-2.25	-1.25	-2.25	
-0.75	-0.75	-0.75	-0.75	-0.75	-0.75	-1.25	-0.75	-1.25	-0.75	-1.75	-0.75	-1.75	-1.00	-1.75	-0.75	-2.25	-1.00	-2.25	-1.00	-2.25	
-0.50	-0.50	-0.75	-0.50	-0.75	-0.50	-1.25	-0.50	-1.25	-0.50	-1.75	-0.50	-1.75	-0.75	-1.75	-0.50	-2.25	-0.75	-2.25	-0.75	-2.25	
-0.25	-0.25	-0.75	-0.25	-0.75	-0.25	-1.25	-0.25	-1.25	-0.25	-1.75	-0.25	-1.75	-0.50	-1.75	-0.25	-2.25	-0.50	-2.25	-0.50	-2.25	
+0.00	+0.00	-0.75	+0.00	-0.75	+0.00	-1.25	+0.00	-1.25	+0.00	-1.75	+0.00	-1.75	-0.25	-1.75	+0.00	-2.25	-0.25	-2.25	-0.25	-2.25	
+0.25	+0.25	-0.75	+0.25	-0.75	+0.25	-1.25	+0.25	-1.25	+0.25	-1.75	+0.25	-1.75	-0.00	-1.75	+0.25	-2.25	+0.00	-2.25	+0.00	-2.25	
+0.50	+0.50	-0.75	+0.50	-0.75	+0.50	-1.25	+0.50	-1.25	+0.50	-1.75	+0.50	-1.75	+0.25	-1.75	+0.50	-2.25	+0.25	-2.25	+0.25	-2.25	
+0.75	+0.75	-0.75	+0.75	-0.75	+0.75	-1.25	+0.75	-1.25	+0.75	-1.75	+0.75	-1.75	+0.50	-1.75	+0.75	-2.25	+0.50	-2.25	+0.50	-2.25	
+1.00	+1.00	-0.75	+1.00	-0.75	+1.00	-1.25	+1.00	-1.25	+1.00	-1.75	+1.00	-1.75	+0.75	-1.75	+1.00	-2.25	+0.75	-2.25	+0.75	-2.25	
+1.25	+1.25	-0.75	+1.25	-0.75	+1.25	-1.25	+1.25	-1.25	+1.25	-1.75	+1.25	-1.75	+1.00	-1.75	+1.25	-2.25	+1.00	-2.25	+1.00	-2.25	
+1.50	+1.50	-0.75	+1.50	-0.75	+1.50	-1.25	+1.50	-1.25	+1.50	-1.75	+1.50	-1.75	+1.25	-1.75	+1.50	-2.25	+1.25	-2.25	+1.25	-2.25	
+1.75	+1.75	-0.75	+1.75	-0.75	+1.75	-1.25	+1.75	-1.25	+1.75	-1.75	+1.75	-1.75	+1.50	-1.75	+1.75	-2.25	+1.50	-2.25	+1.50	-2.25	
+2.00	+2.00	-0.75	+2.00	-0.75	+2.00	-1.25	+2.00	-1.25	+2.00	-1.75	+2.00	-1.75	+1.75	-1.75	+2.00	-2.25	+1.75	-2.25	+1.75	-2.25	
+2.25	+2.25	-0.75	+2.25	-0.75	+2.25	-1.25	+2.25	-1.25	+2.25	-1.75	+2.25	-1.75	+1.75	-1.75	+2.25	-2.25	+2.00	-2.25	+2.00	-2.25	
+2.50	+2.50	-0.75	+2.50	-0.75	+2.50	-1.25	+2.50	-1.25	+2.50	-1.75	+2.50	-1.75	+2.25	-1.75	+2.50	-2.25	+2.25	-2.25	+2.25	-2.25	
+2.75	+2.75	-0.75	+2.75	-0.75	+2.75	-1.25	+2.75	-1.25	+2.75	-1.75	+2.75	-1.75	+2.50	-1.75	+2.75	-2.25	+2.50	-2.25	+2.50	-2.25	
+3.00	+3.00	-0.75	+3.00	-0.75	+3.00	-1.25	+3.00	-1.25	+3.00	-1.75	+3.00	-1.75	+2.75	-1.75	+3.00	-2.25	+2.75	-2.25	+2.75	-2.25	
+3.25	+3.25	-0.75	+3.25	-0.75	+3.25	-1.25	+3.25	-1.25	+3.25	-1.75	+3.25	-1.75	+3.00	-1.75	+3.25	-2.25	+3.00	-2.25	+2.75	-2.25	
+3.50	+3.50	-0.75	+3.50	-0.75	+3.50	-1.25	+3.50	-1.25	+3.50	-1.75	+3.50	-1.75	+3.25	-1.75	+3.50	-2.25	+3.25	-2.25	+3.00	-2.25	
+3.75	+3.75	-0.75	+3.75	-0.75	+3.75	-1.25	+3.75	-1.25	+3.75	-1.75	+3.75	-1.75	+3.50	-1.75	+3.75	-2.25	+3.50	-2.25	+3.25	-2.25	
+4.00	+4.00	-0.75	+4.00	-0.75	+4.00	-1.25	+4.00	-1.25	+4.00	-1.75	+4.00	-1.75	+3.75	-1.75	+4.00	-2.25	+4.00	-2.25	+3.75	-2.25	
+4.25																				+4.00	-2.25

SFERA OČALNE LEČE (D)

CILINDER KONTAKTNE LEČE

SFERA KONTAKTNE LEČE

VEČ ZADOVOLJNIH UPORABNIKOV ŽE PRVI DAN 1

*Pokritost pacientov z astigmatizmom s cilindrom -2.0D ali nižjim.
Reference: 1. Luensmann D, Schaeffer JL, Rumney NJ, Stanberry A, Walsh K, Jones L. Spectacle prescriptions review to determine prevalence of ametropia and coverage of frequent replacement soft toric contact lenses. *Cont Lens Anterior Eye*. 2018 Oct;41(5):412-420. 2. PRECISION1 (DDT2) Lens with Smart Surface study; Alcon data on file, 2019. 3. In a randomized, subject-masked, multi-site clinical study with over 150 patients; significance demonstrated at the 0.05 level; Alcon data on file, 2005. 4. Alcon data on file, 2020. 5. In vitro analysis of surface properties (SMARTSURFACE™) of PRECISION1™ contact lenses; Alcon data on file, 2019. 6. In a study where n=78 eyes; Alcon data on file, 2020. 7. Based on a survey of 245 patients in Germany, Italy, Austria and Switzerland; Alcon data on file, 2021. 8. Based on a survey of 50 eye care professionals in Germany, Italy, Austria, Switzerland, and the U.S.; Alcon data on file, 2021

Za način uporabe, nego in varnostne ukrepe, prosimo, preberite navodilo za uporabo.
 © 2021 Alcon Inc. 2/21 EMEA-PRI-2100004
 Uradni distributer izdelkov podjetja Alcon v Sloveniji je EMEA d.o.o.

